



APTOS

Katalog

Nitě a metody

Obsah

04–13

Nitě s HA

- 06–09 Metoda Visage Excellence
- 10–13 Metoda Nano Excellence

14–35

Konturování obličeje

- 16–19 Metoda Visage Excellence
- 20–23 Metoda Light Lift Needle
- 24–27 Metoda Light Lift Thread
- 28–31 Metoda Light Lift Spring
- 32–35 Metoda Light Lift Linea

Obsah

36–49

Zpevnění tváře a těla

- 38–41 Metoda Nano Excellence
- 42–45 Metoda Nano Spring
- 46–49 Metoda Nano Vitis

50–55

Konturování těla

- 52–55 Metoda Body Excellence

56–61

Metoda Sole

- 58–61 Metoda Sole Rhinoplasty


METODA EXCELLENCE

Visage Excellence je univerzální vstřebatelná nit se speciálně navrženými vícesměrnými háčky. Tato jejich jedinečná vlastnost zvyšuje pevnost uchopení tkáně. Vícesměrné háčky umožňují silnější rovnoměrné napětí a držení měkkých tkání.

Nitě Visage Excellence lze použít pro fixaci subdermálních tkání obličeje a krku.


Design nití Visage Excellence umožňuje efektivně provádět celou řadu zákroků jednoduchým a neinvazivním postupem. Nitě se zavádějí atraumatickou kanylou, čímž se zabrání většímu krvácení a otoku po zákroku.

Metoda Visage Excellence je snadná, rychlá a vyžaduje minimální dobu zotavení.

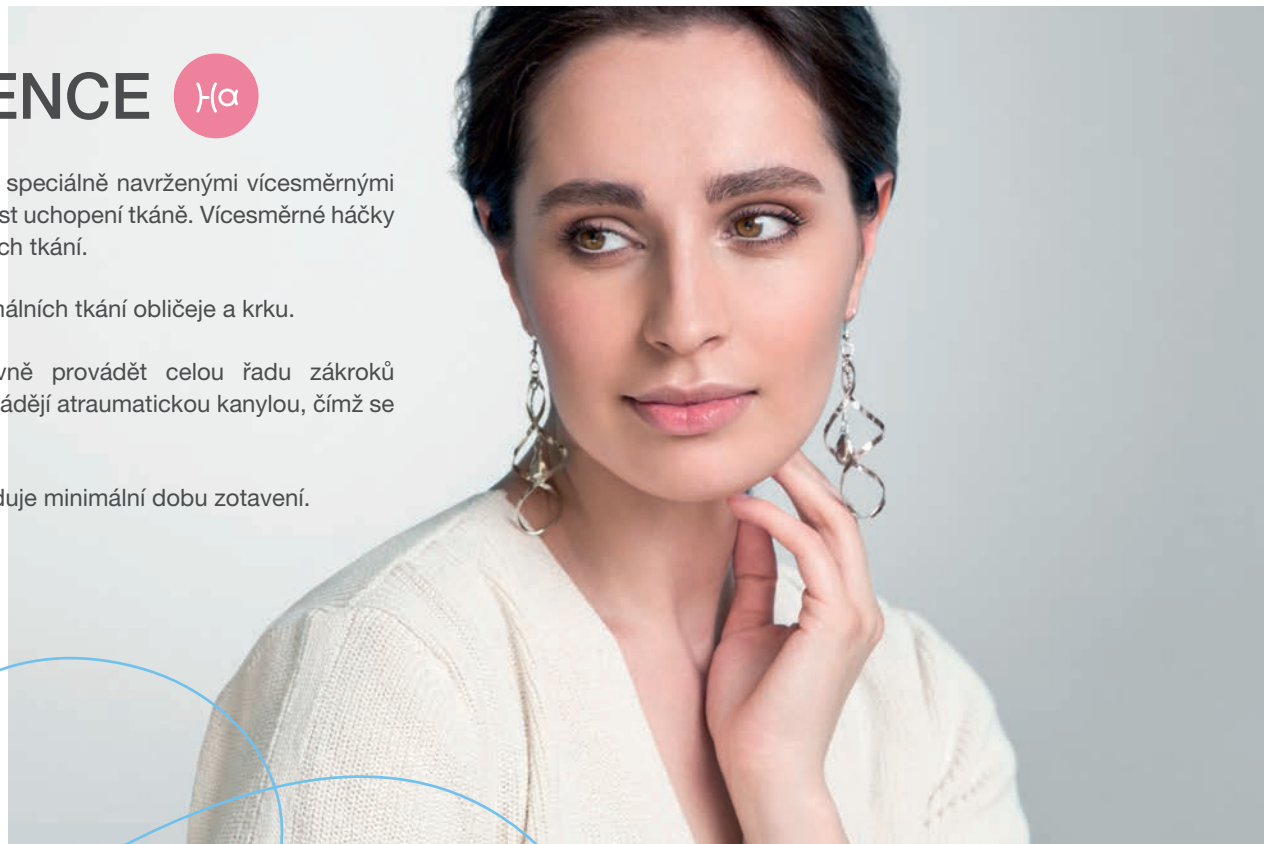


3. generace nití
s kyselinou hyaluronovou


OBLASTI APLIKACE:

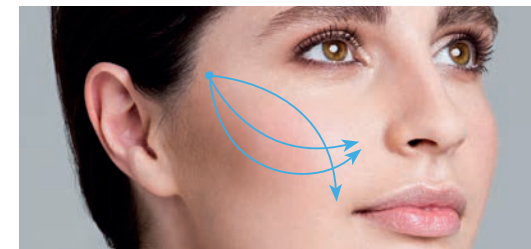


Lícni kosti

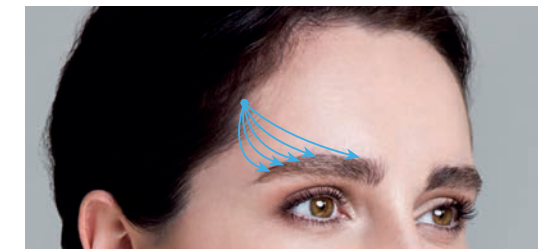

Obočí

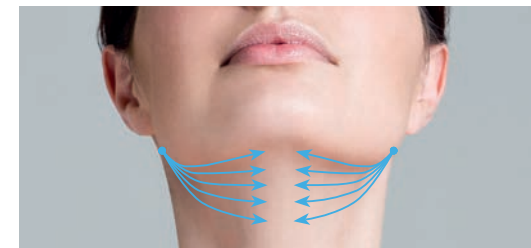

Podbradek / krk

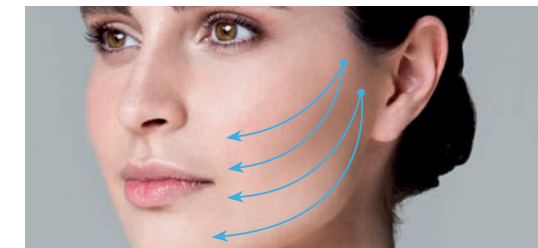


Lícni kosti / brada

METODA EXCELLENCE



3. generace nití
s kyselinou hyaluronovou

BALENÍ OBSAHUJE:

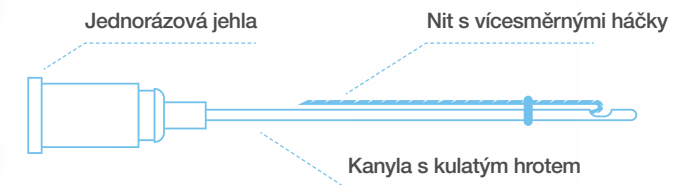

EVHA

P(LA/CL+HA) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 190 mm - 10 ks
Kanyla s kulatým hrotem 20Gx150 mm, rovná - 10 ks
Kanyla s kulatým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks
Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks
Snímatelný nástavec jehly

EVSHA S

P(LA/CL+HA) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 100 mm - 10 ks
Kanyla s kulatým hrotem 21Gx100 mm, rovná - 10 ks
Kanyla s kulatým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks
Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks
Snímatelný nástavec jehly

Nano

METODA EXCELLENCE




Nano Excellence je univerzální vstřebatelná nit se speciálně navrženými vícesměrnými háčky určená pro zpevnění a revitalizaci. Nitě Nano Excellence po zavedení do měkkých tkání stimulují obnovu kolagenu a vytváří tak zdravou novou pleť.


Metoda Nano Excellence může být použita pro zpevnění a omlazení různých částí obličeje, krku a těla.

Nano Excellence díky svému efektivnímu provedení napíná kůži v celé ošetřované oblasti. Nitě se zavádějí přes atraumatickou kanylu s tupou špičkou, čímž se zabrání většímu krvácení a otoku po proceduře.

Metoda je snadná, rychlá a ze strany pacienta vyžaduje minimální dobu zotavení.

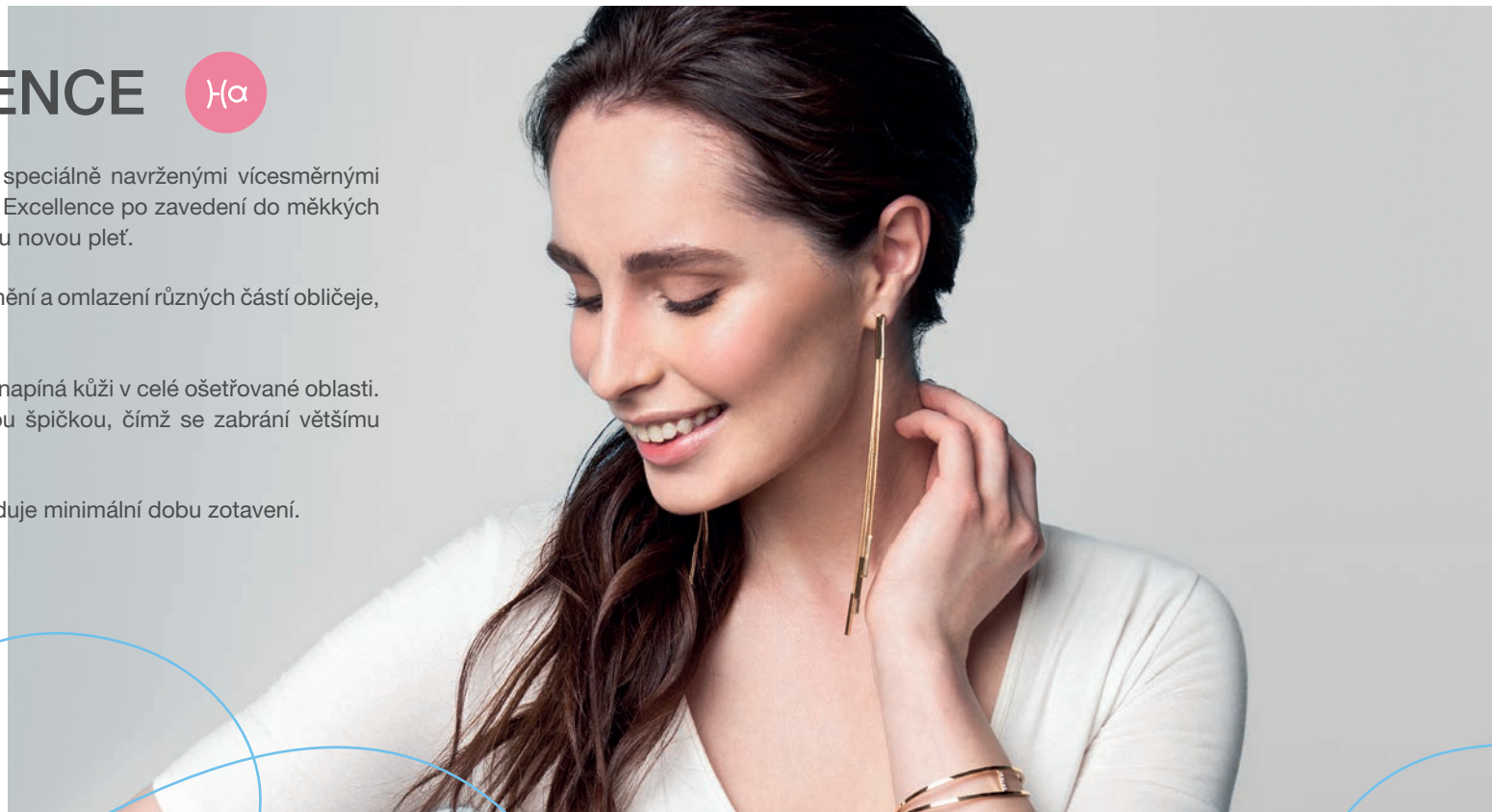

OBLASTI APLIKACE:

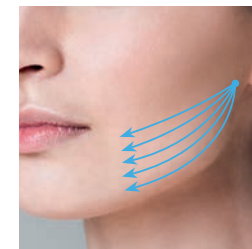


Brada




Lícni kosti



Podbradek

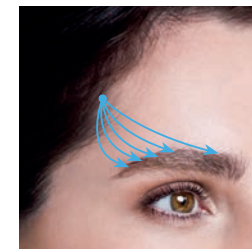

Obočí

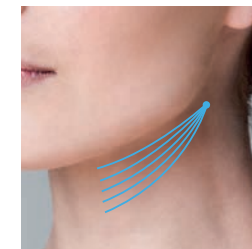

Krk

3. generace nití
s kyselinou hyaluronovou


Nano

METODA EXCELLENCE



3. generace nití
s kyselinou hyaluronovou

BALENÍ OBSAHUJE:

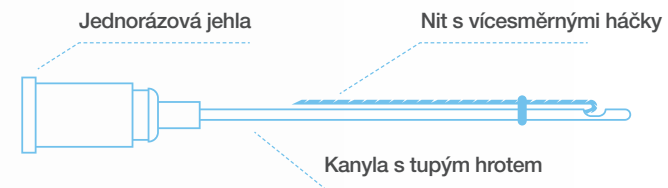

NEHA

P(LA/CL+HA) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 80 mm - 10 ks

Kanyla s tupým hrotem 21Gx70 mm, rovná - 10 ks

Kanyla s tupým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehly


METODA EXCELLENCE

Visage Excellence je univerzální vstřebatelná nit se speciálně navrženými vícesměrnými háčky. Tato jejich jedinečná vlastnost zvyšuje pevnost uchopení tkáně. Vícesměrné háčky umožňují silnější rovnoměrné napětí a držení měkkých tkání.


Metodu Visage Excellence lze použít pro fixaci subdermálních tkání obličeje a krku.

Design nití Visage Excellence umožňuje efektivně provádět celou řadu zákroků jednoduchým a neinvazivním postupem. Nitě se zavádějí atraumatickou kanylou s kulatým hrotem, čímž se zabrání většímu krvácení a otoku po zákroku.

Metoda je snadná, rychlá a vyžaduje minimální dobu zotavení.

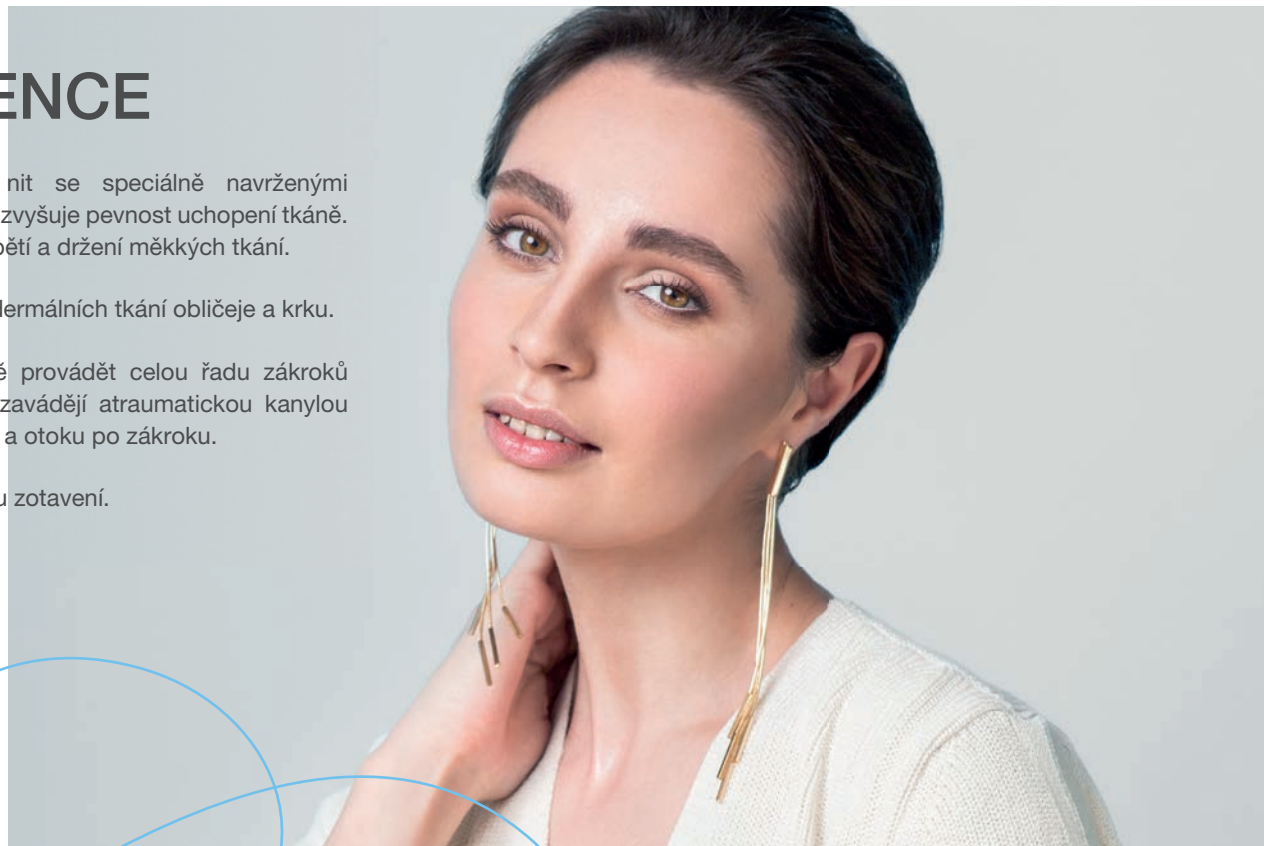


OBLASTI APLIKACE:

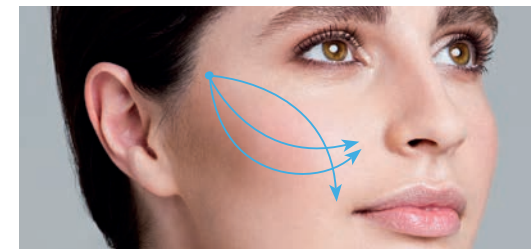


Lícni kosti



Obočí

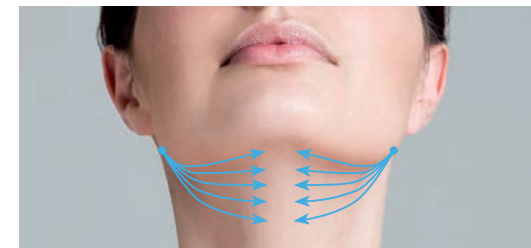

Podbradek / krk


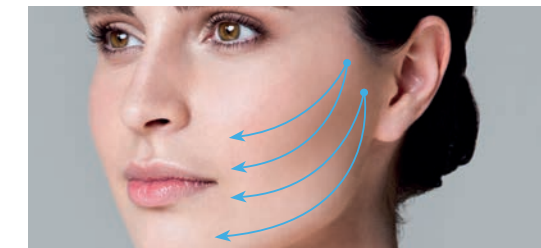


Lícni kosti / krk

METODA EXCELLENCE



BALENÍ OBSAHUJE:

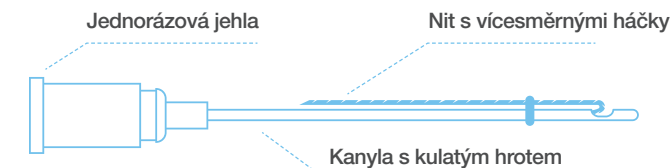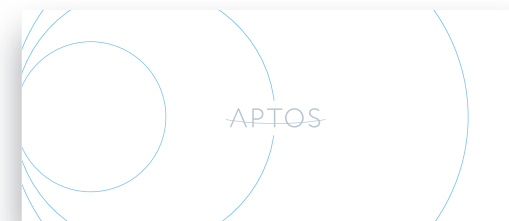

EV

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 190 mm - 10 ks
 Kanyla s kulatým hrotem 20Gx150 mm, rovná - 10 ks
 Kanyla s kulatým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks
 Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks
 Snímatelný nástavec jehly

EVS S


P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, 100 mm - 10k s
 Kanyla s kulatým hrotem 21Gx100 mm, rovná - 10 ks
 Kanyla s kulatým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks
 Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks
 Snímatelný nástavec jehly

METODA NEEDLE

Light Lift Needle je nit s dvousměrnými háčky, která umožňuje minimálně invazivní řešení změn měkkých tkání souvisejících s věkem. Nítě Light Lift Needle jsou k dispozici ve vstřebatelné i nevstřebatelné verzi. Zavádět by se měly do podkožního tuku.

Light Lift Needle je nit upevněna uprostřed trojúhelníkových jehel s dvojími ostrými hranami. U verze Light Lift Needle Soft je nit upevněna na konci rovných lancetových kanyl s dvojími ostrými hroty. U verze Light Lift Needle Blunt je nit upevněna na konci dvou rovných kanyl s dvojími tupými hroty.


Struktura nitě umožňuje lékařům upravit submentální oblast a zvednout obočí jediným stehem vedoucím ze strany na stranu, aniž by jehlu vytažovali ven z kůže. Díky tomu nehrozí riziko retrakce kůže na výstupních místech. Nový tvar krku je zřejmý na první pohled. Fixace má dlouhodobý účinek.

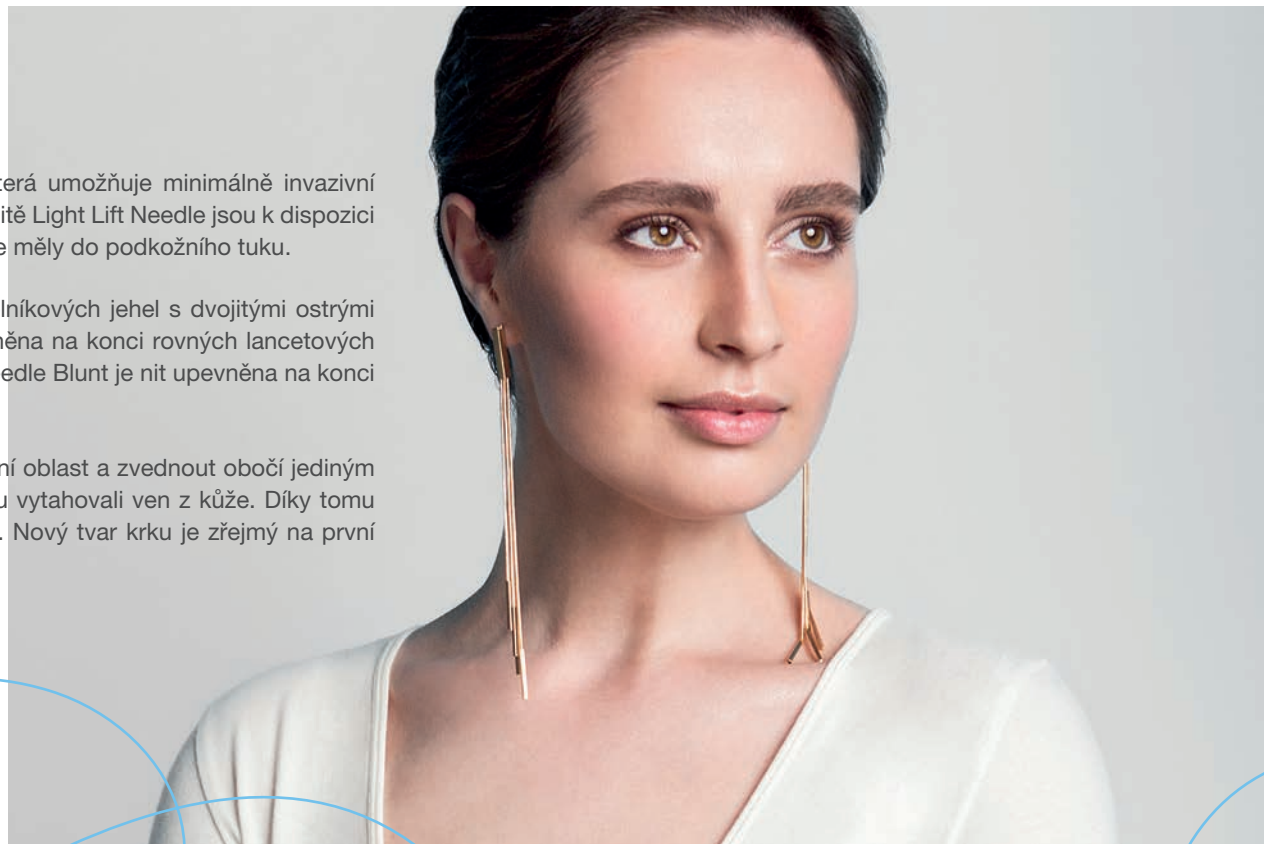


OBLASTI APLIKACE:



Lící kosti

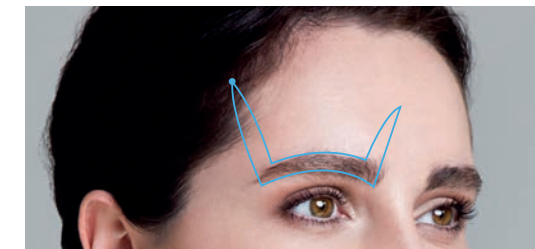


Obočí

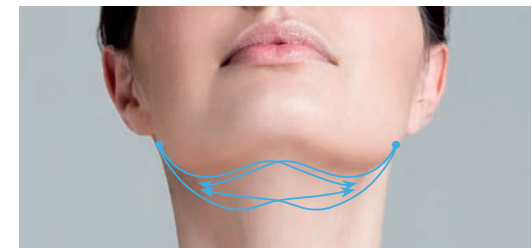


Podbradek

Light lift

METODA NEEDLE

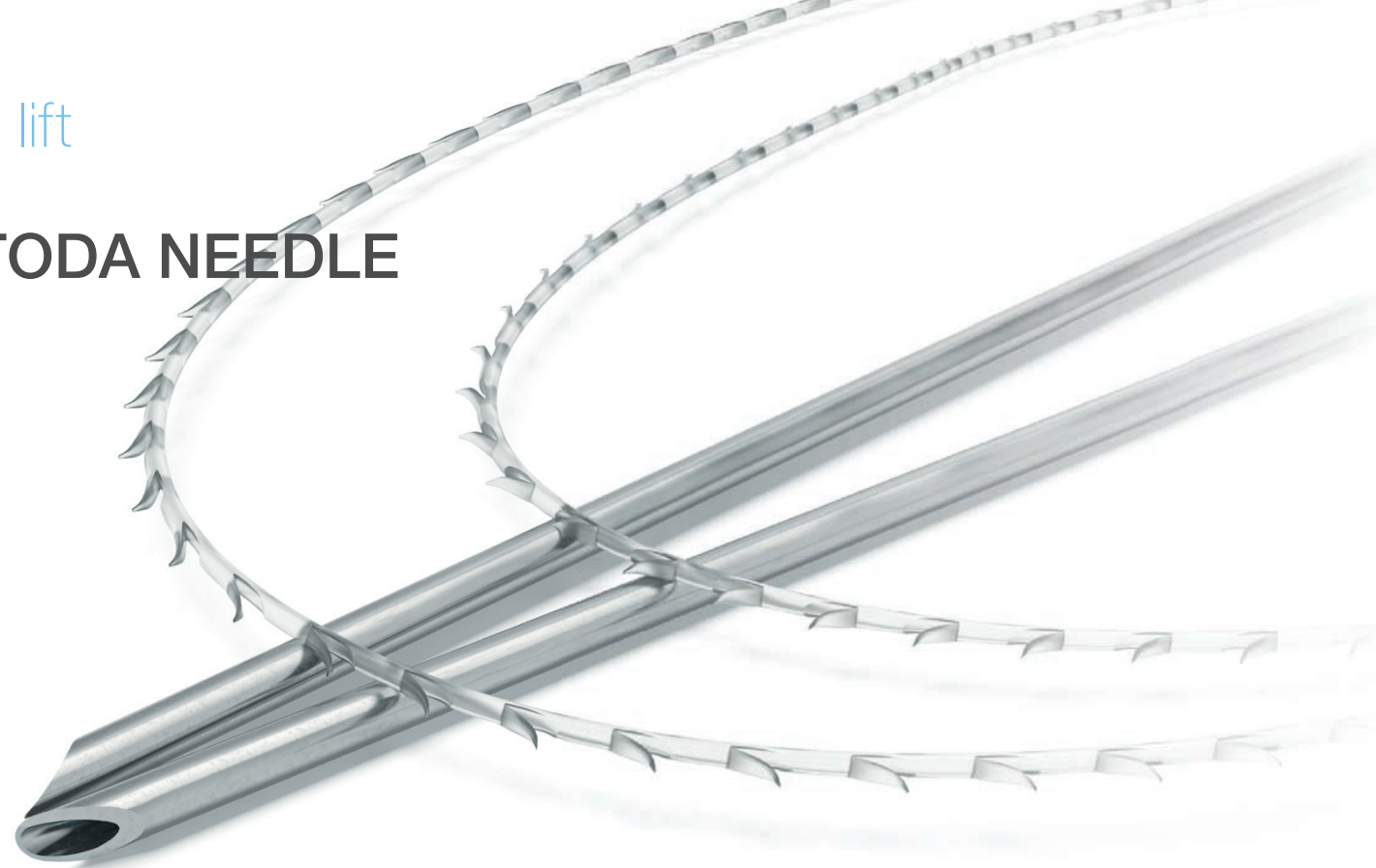

BALENÍ OBSAHUJE:

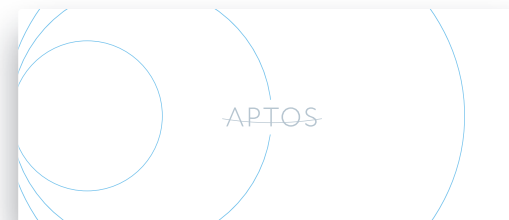


LLN2G

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 500 mm - 2 ks
Trojúhelníková jehla GS1,2x100 mm, rovná - 4 ks
Standardní nástavec jehly


LLN2GSL ^(S)

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 500 mm - 2 ks
Kanyla s dvojitým lancetovým hrotem, 1,1x120 mm,
rovná - 4 ks
Standardní nástavec jehly

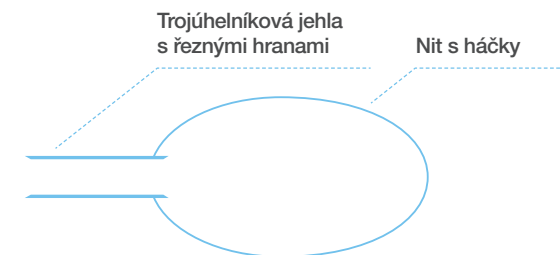

LLNMB ^(B)

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 500 mm - 2 ks
Kanyla s dvojitým tupým hrotem, 21Gx110 mm - 4 ks
Standardní nástavec jehly

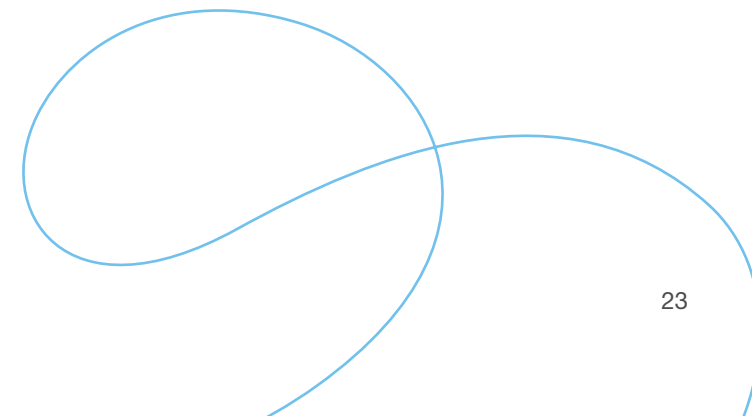


METODA THREAD


Light Lift Thread je nit s dvousměrnými háčky, která umožňuje minimálně invazivní řešení změn měkkých tkání souvisejících s věkem. Nitě Light Lift Thread jsou k dispozici ve vstřebatelné i nevstřebatelné verzi. Nit je upevněna na konci rovných trojúhelníkových jehel s ostrými hranami.

U verze Soft je nit upevněna na konci dvou rovných lancetových kanyl s ostrými hroty. U tupé verze Light Lift Thread je nit upevněna na konci dvou rovných kanyl s tupými hroty.

Struktura nitě umožňuje lékařům provádět úpravy obočí a korigovat oblast „syslíků“, střední část obličeje a submentální oblast různými technikami zaručujícími efektivní výsledky. Postup je snadný, rychlý, výrazně se zkracuje doba provádění zákroku a pacienti nepotřebují prakticky žádnou dobu zotavení.

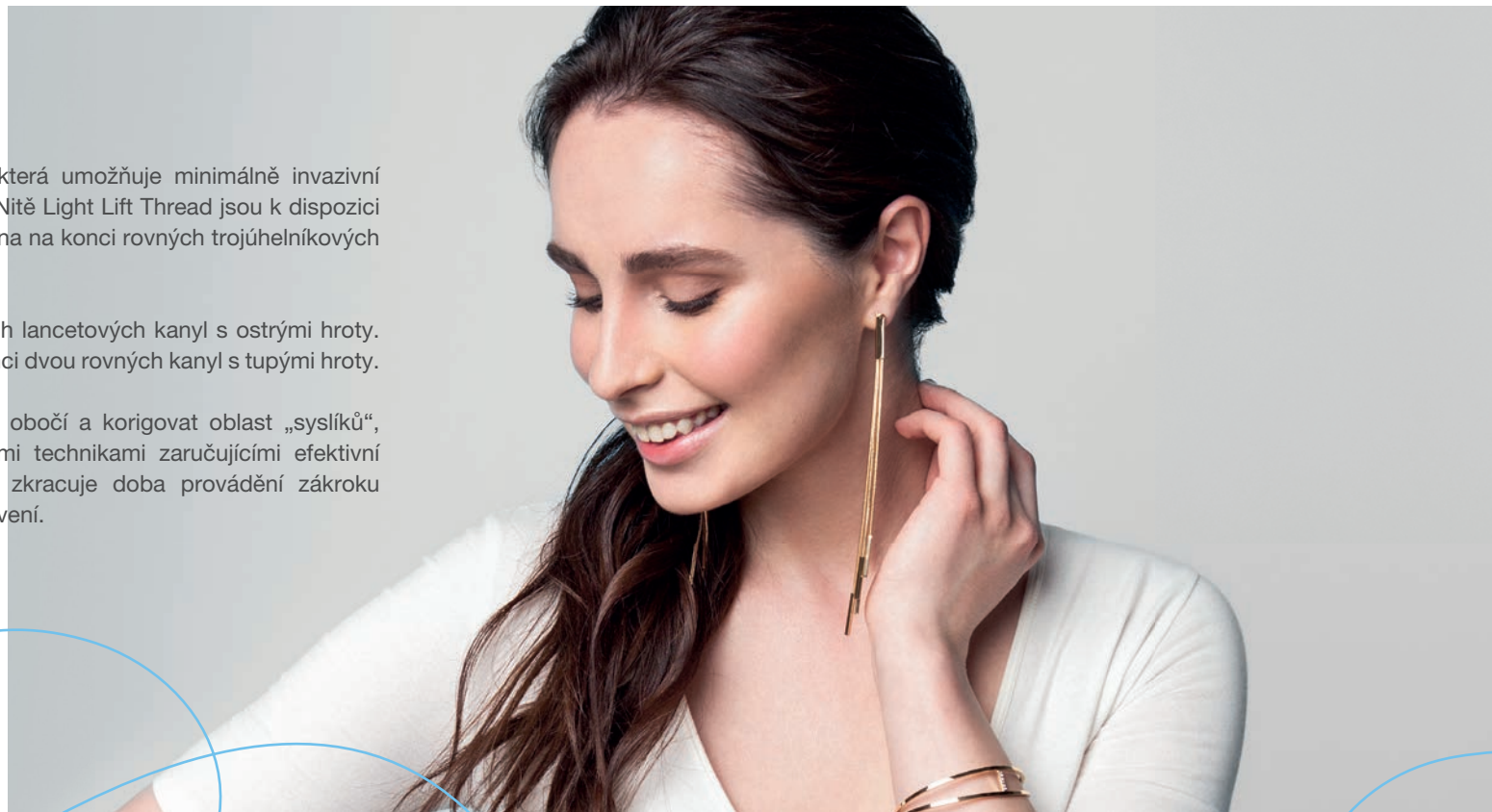


OBLASTI APLIKACE:

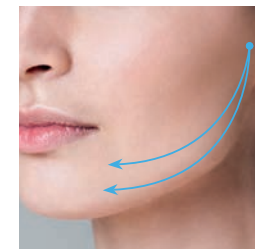


Brada




Lící kosti

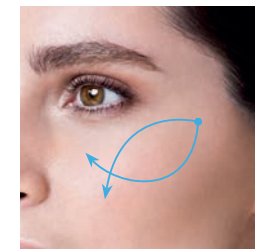

Lící kosti

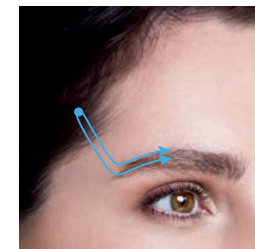

Obočí


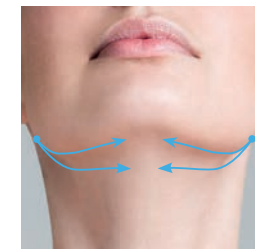


Podbradek

Light lift

METODA THREAD

BALENÍ OBSAHUJE:

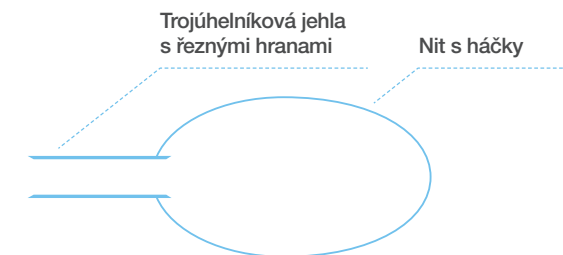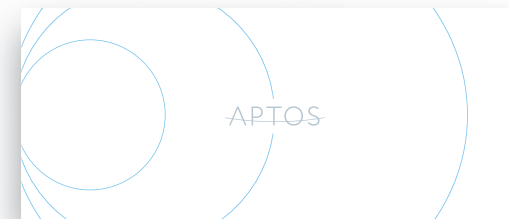

LLT2G

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 250 mm - 2 ks
Trojúhelníková jehla GS1,2x110 mm, rovná - 4 ks
Standardní nástavec jehly

LLT2GS ^(S)

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 250 mm - 2 ks
Lancetová kanyla, 0,83x100 mm, rovná - 4 ks
Standardní nástavec jehly

LLTMB ^(B)

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP3, 250 mm - 2 ks
Kanyla s tupým hrotem, 21Gx100 mm - 4 ks
Standardní nástavec jehly

Light lift

METODA SPRING


Light Lift Spring je nit spirálovitě obtočená kolem špičky lancetové jehly s ostrým hrotem. U verze Light Lift Spring Soft je nit spirálovitě obtočená kolem kanyly s tupou špičkou.

Nitě jsou k dispozici ve vstřebatelné i nevstřebatelné verzi.

Pružinka po zavedení do kůže udržuje svou elasticitu a tvar, a dokáže tak účinně povytáhnout koutky úst. Nit dále stimuluje produkci kolagenu a vytváří zdravou, novou pokožku.



OBLASTI APLIKACE:

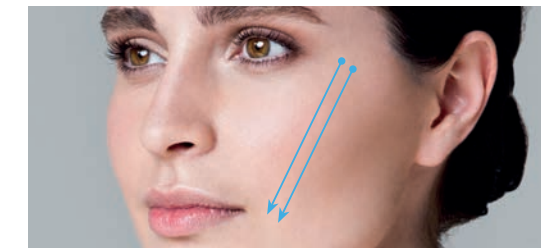


Vrásky v koutcích úst

Light lift

METODA SPRING



BALENÍ OBSAHUJE:

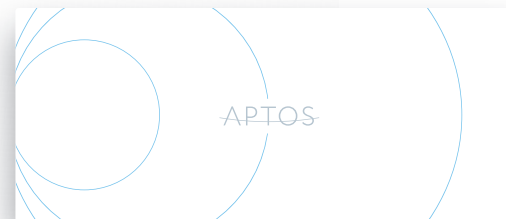

LLS

P(LA/CL) nit USP 2/0, EP 3, 440 mm spirálovitě obtočená kolem punkční jehly 0,9x90 mm, rovná - 2 ks

P(LA/CL) nit USP 2/0, EP 3, 470 mm spirálovitě obtočená kolem punkční jehly 1,1x100 mm, rovná 2 ks


Snímatelný nástavec jehly

LLSS S

P (LA / CL) nit USP 2/0, EP 3, 440 mm spirálovitě obtočená kolem jehly s tupým hrotem 0,9x90 mm, rovná - 2 ks

P(LA/CL) nit USP 2/0, EP 3, 470 mm spirálovitě obtočená kolem jehly s tupým hrotem 1,1x100 mm, rovná - 2 ks

Snímatelný nástavec jehly

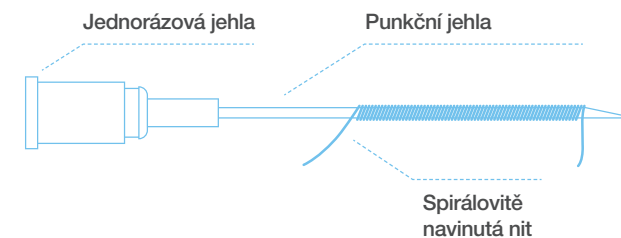


METODA LINEA


Light Lift Linea je vstřebatelná nit se speciálně navrženými dvojsměrnými háčky umožňující lifting povislých tváří. Zákrok je rychlý a snadný a nevyžaduje incize.

Nitě se zavádějí atraumatickou kanylou s tupým hrotem do podkožní tukové vrstvy. Zákrok se provádí v lokální anestezii. Po zavedení se háčky nití rozevrou a vytvoří podpůrnou strukturu pro tkáň.


Výsledky jsou viditelné ihned po zákroku: pleť je vypnutá a tuková tkáň je přemístěna.

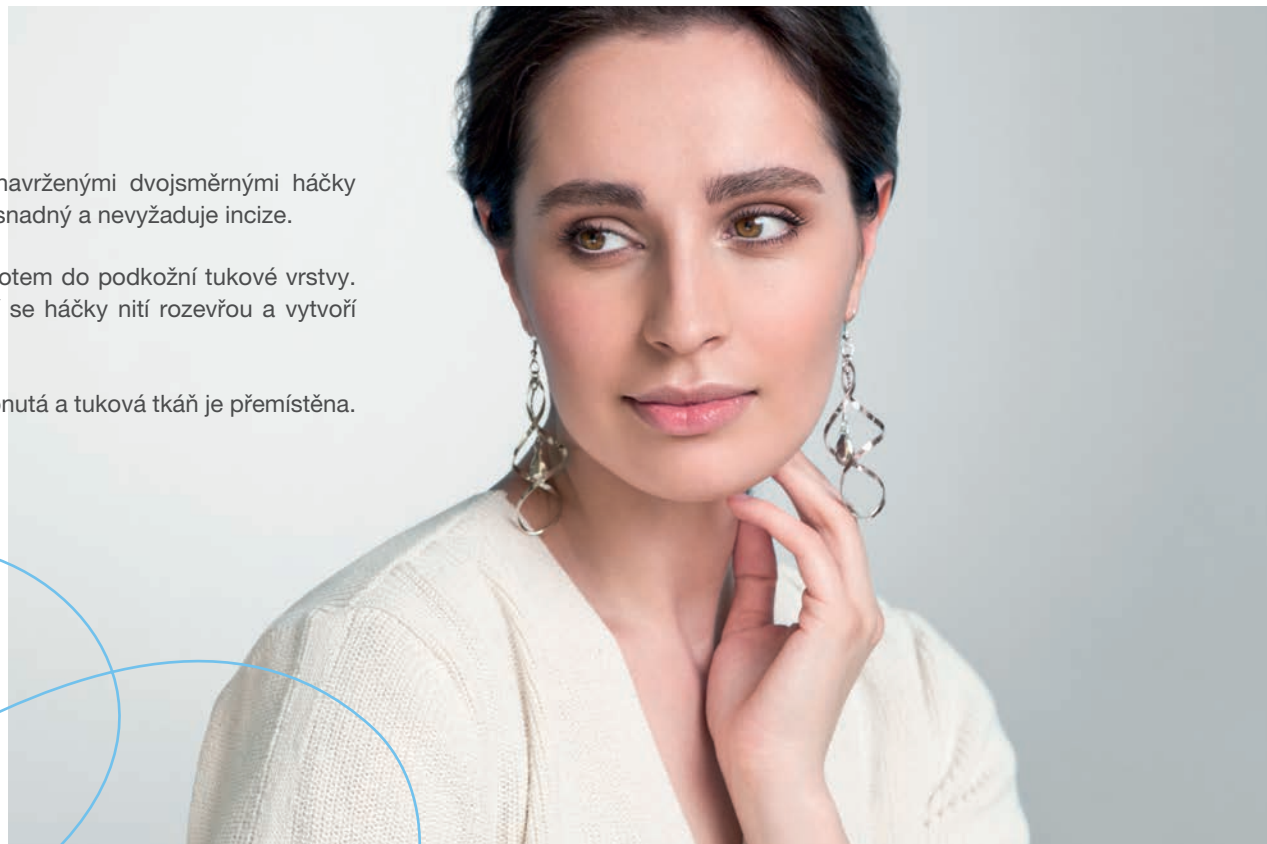

OBLASTI APLIKACE:

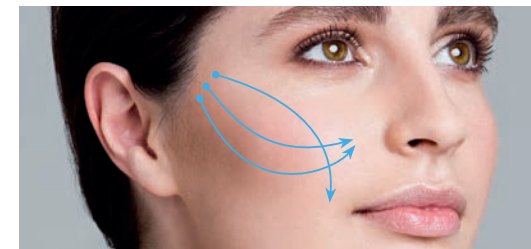


Střední část obličeje

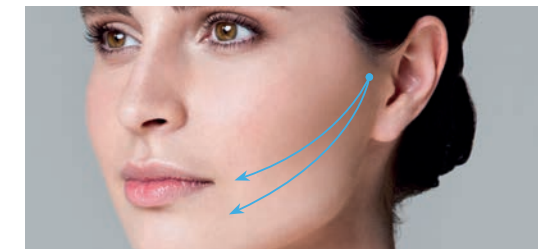

Střední část obličeje



Dolní část obličeje

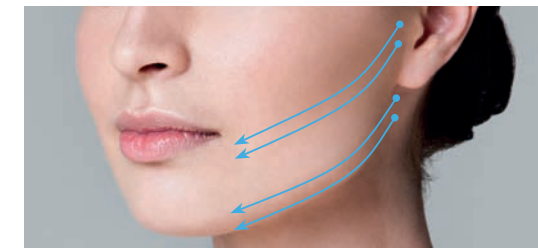

Dolní část obličeje / krk

Light lift

METODA LINEA



BALENÍ OBSAHUJE:




LLL

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 120 mm - 10 ks

Kanyla s tupým hrotem 1,1x120 mm, rovná - 1 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehly

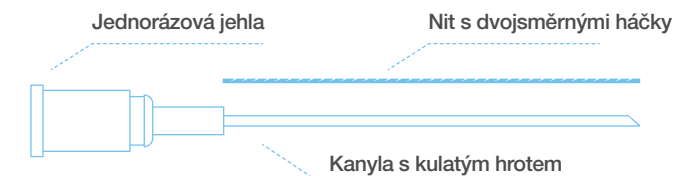


METODA EXCELLENCE

Nano Excellence je univerzální vstřebatelná nit se speciálně navrženými vícesměrnými háčky pro zpevnění a oživení. Nit Nano Excellence stimuluje obnovu kolagenu po zavedení do měkkých tkání a vytváří tak novou zdravou pleť.


Metodu Nano Excellence lze použít pro tvarování a omlazení různých částí obličeje, krku a těla.

Nitě Nano Excellence účinně vypínají kůži v celé ošetřované oblasti. Nitě se zavádějí atraumatickou kanylou s tupou špičkou, čímž se zabrání většímu krvácení a otoku po zákroku.

Metoda je snadná, rychlá a ze strany pacienta vyžaduje minimální dobu zotavení.

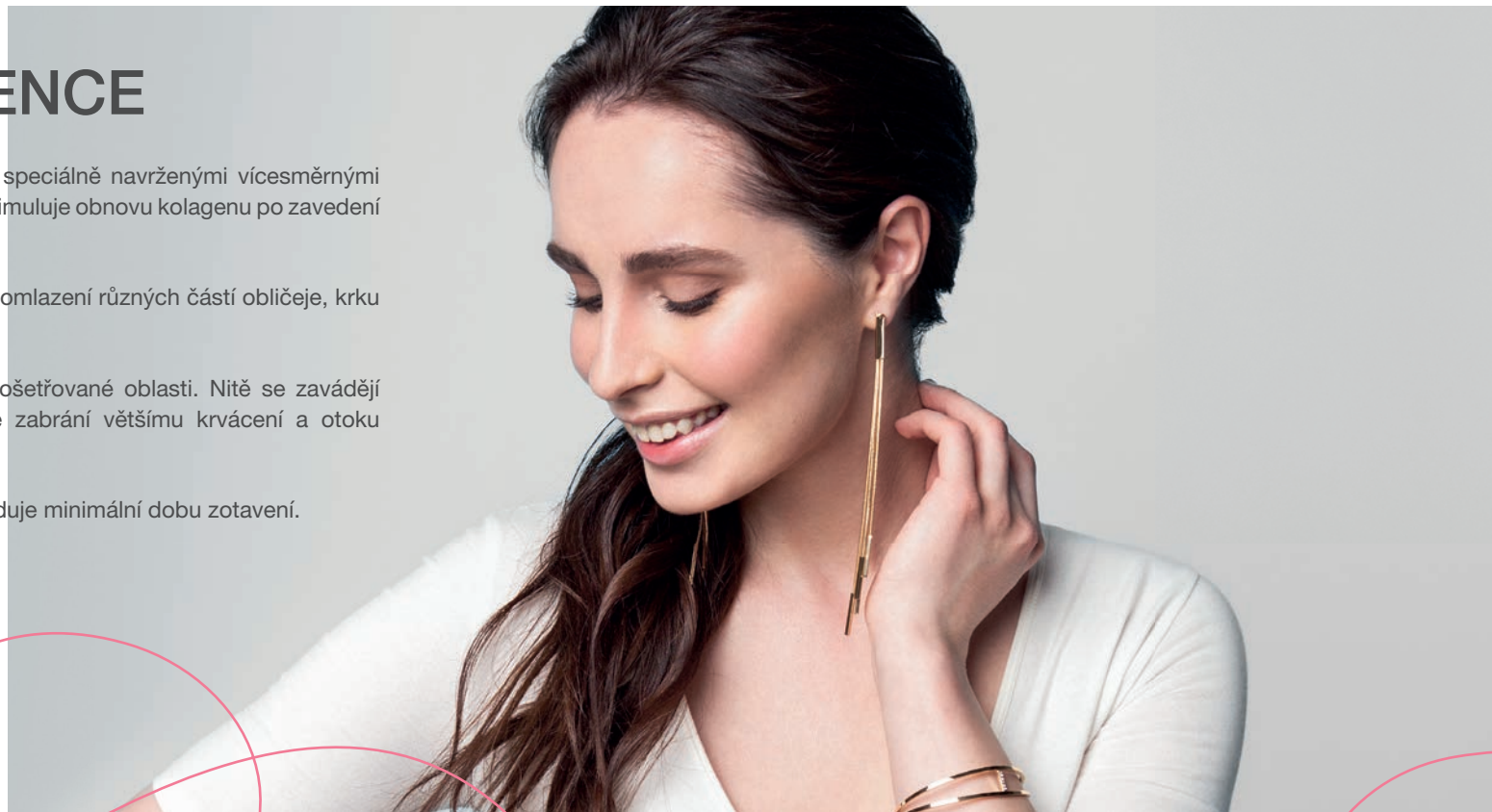


OBLASTI APLIKACE:

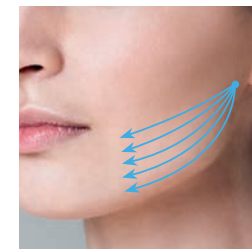


Brada




Lícni kosti

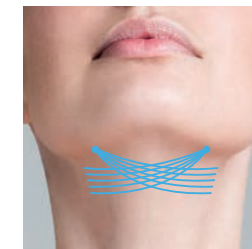

Podbradek

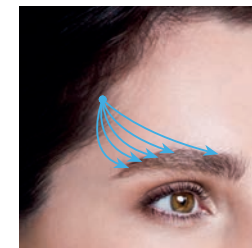

Obočí

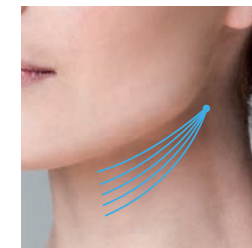


Krk

Nano

METODA EXCELLENCE



BALENÍ OBSAHUJE:

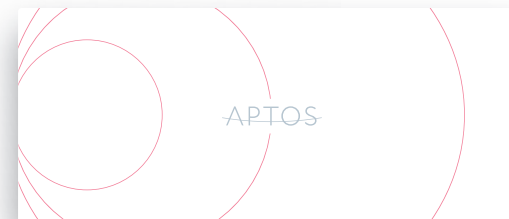


NE

P(LA/CL) Nit s háčky USP 2/0, EP 3, 80 mm - 5 ks

Kanyla s tupým hrotem 21Gx70mm, rovná - 5 ks

Snímatelný nástavec jehly

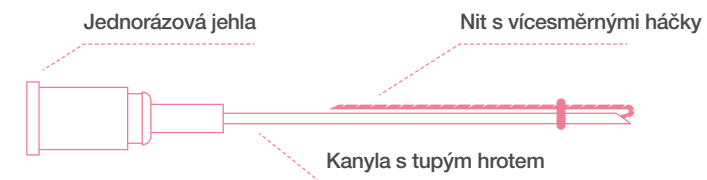


METODA SPRING


Nano Spring je vstřebatelná nit, spirálovitě obtočená kolem kanyly s tupým hrotem. Je určena k revitalizaci a zpevnění různých částí obličeje a ke korekci jemných linek a vrásek v obličeji.

Nitě Nano Spring si po zavedení udržují svou pružnost a tvar a výrazně tak omezují viditelnost a tvorbu hlubokých vrásek v obličeji. Tyto nitě jsou určeny také k liftingu obočí a nosu.


Zárok je snadný, rychlý, zabere minimum času a vyžaduje minimální dobu zotavení.

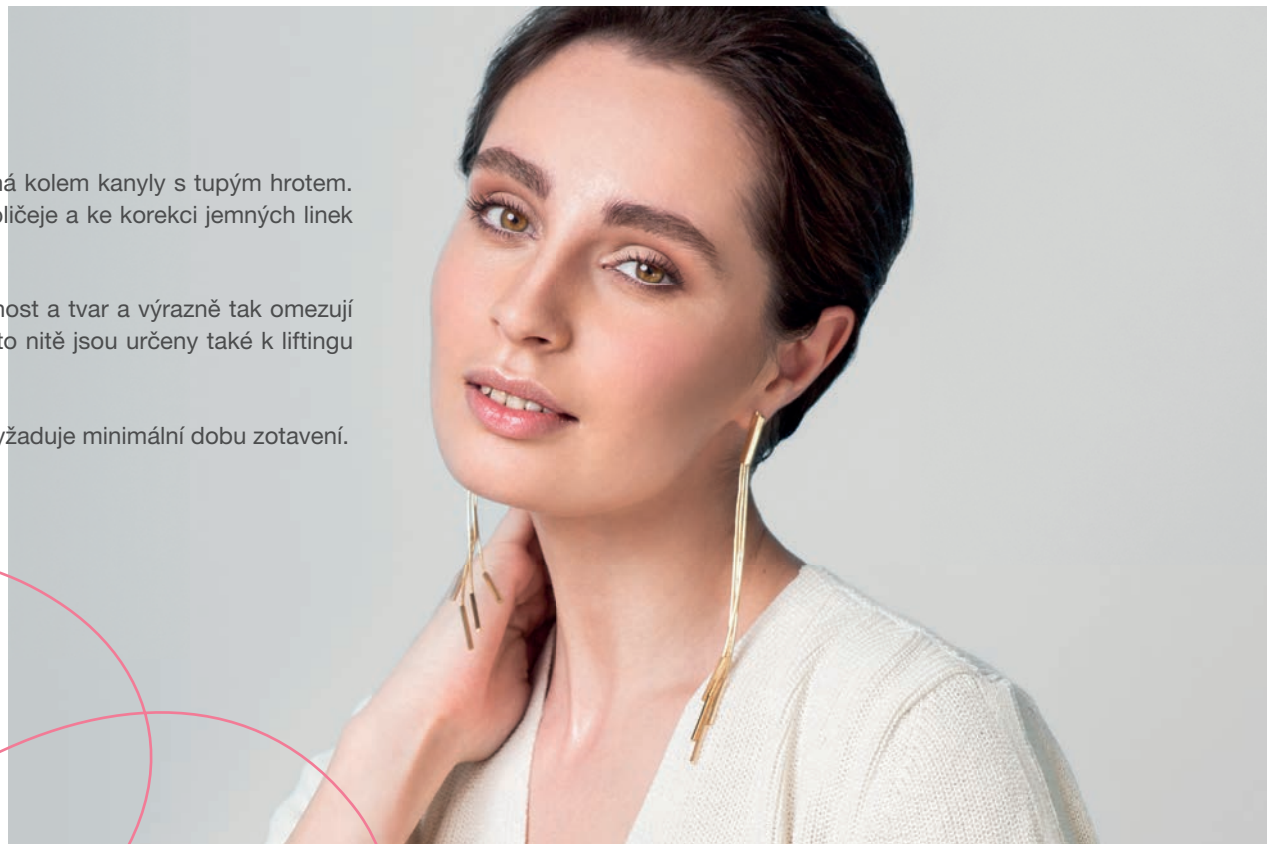


OBLASTI APLIKACE:

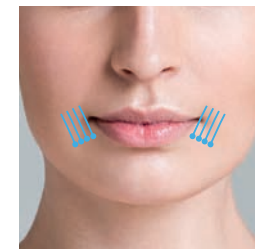

Vrásky v koutcích úst

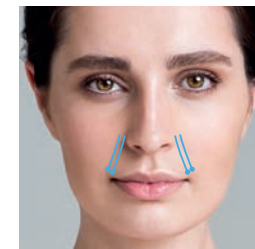


Nasolabiální rýhy

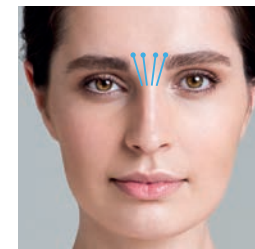


Glabelární vrásky




Vrásky nad horním rtem

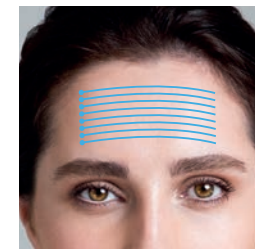


Vrásky na čele

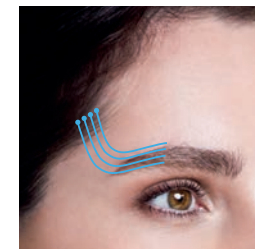

Obočí

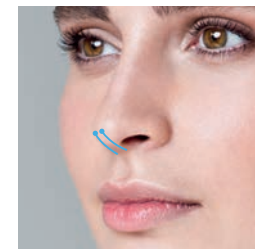


Nos

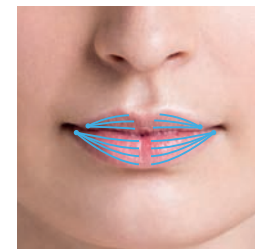



Konturování rtů

Nano

METODA SPRING

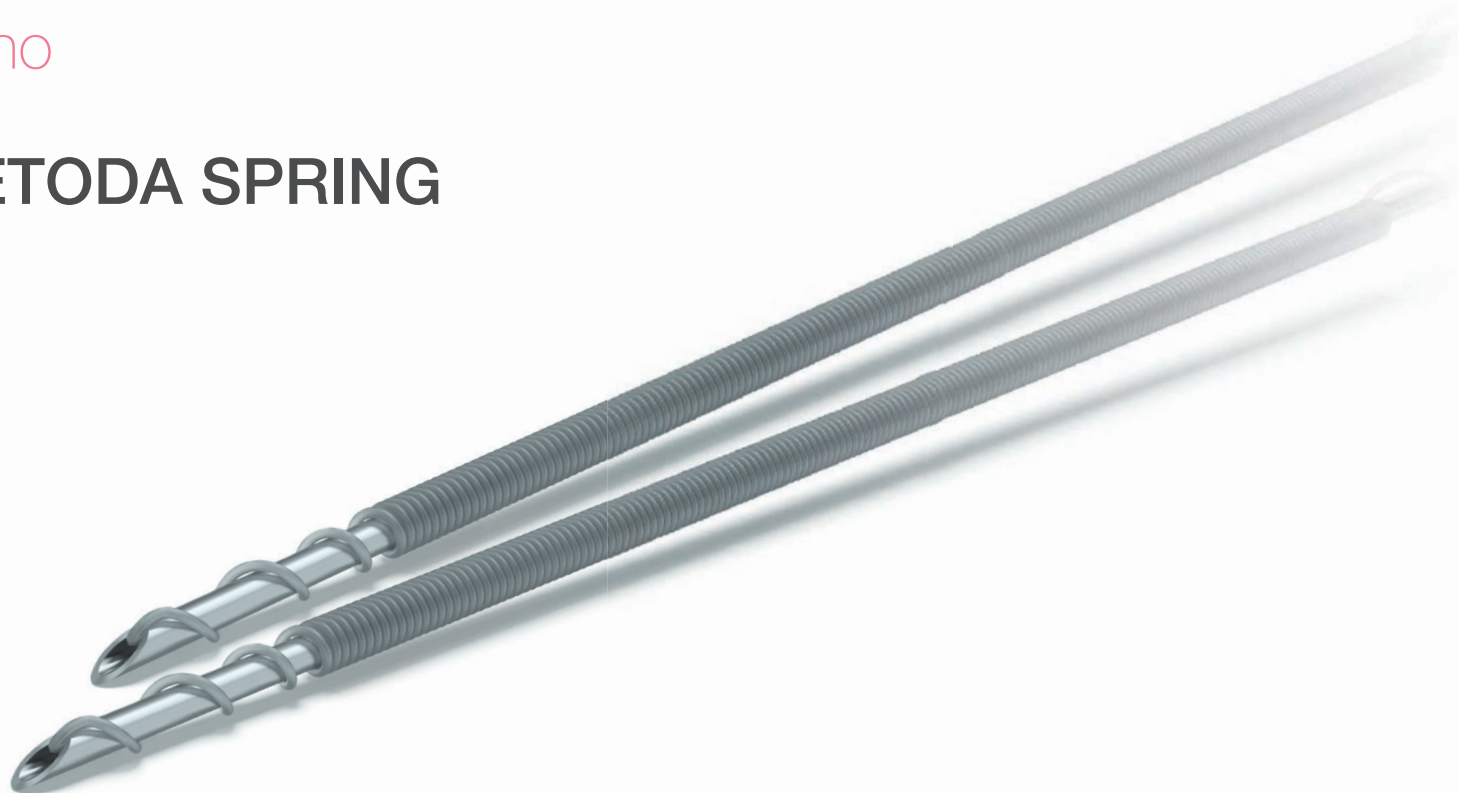

BALENÍ OBSAHUJE:

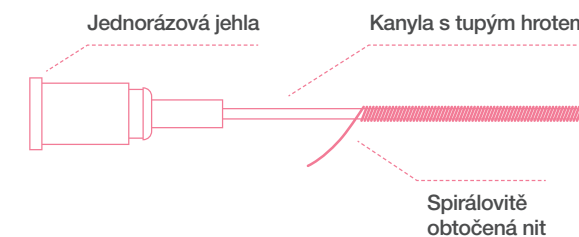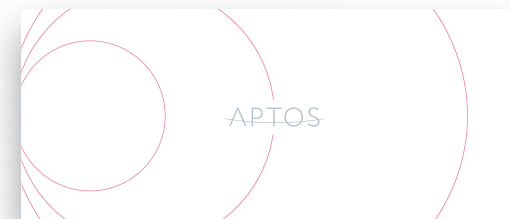

NS7


P(LA/CL) nit USP 5/0, EP 1, 940 mm, spirálovitě obtočená kolem kanyly s tupým hrotem 23Gx70 mm, rovná - 5 ks
Snímatelný nástavec jehly

METODA VITIS


Nano Vitis jsou dvě vstřebatelné nitě stočené do sebe. Dodávají se vsunuté v kanyle s tupou špičkou.

Jsou určeny k oživení a zpevnění různých částí obličeje, krku a těla. Jejich design zvyšuje míru regeneračního účinku na tkáň. Nitě Nano Vitis se po zavedení do kůže začnou rozplétat a zvětší tak svůj objem.


Maximálního výsledku je dosaženo 1–1,5 měsíce po zákroku, účinek trvá asi 1,5–2 roky. Nano Vitis výrazně omezuje viditelnost hlubokých vrásek v obličeji.

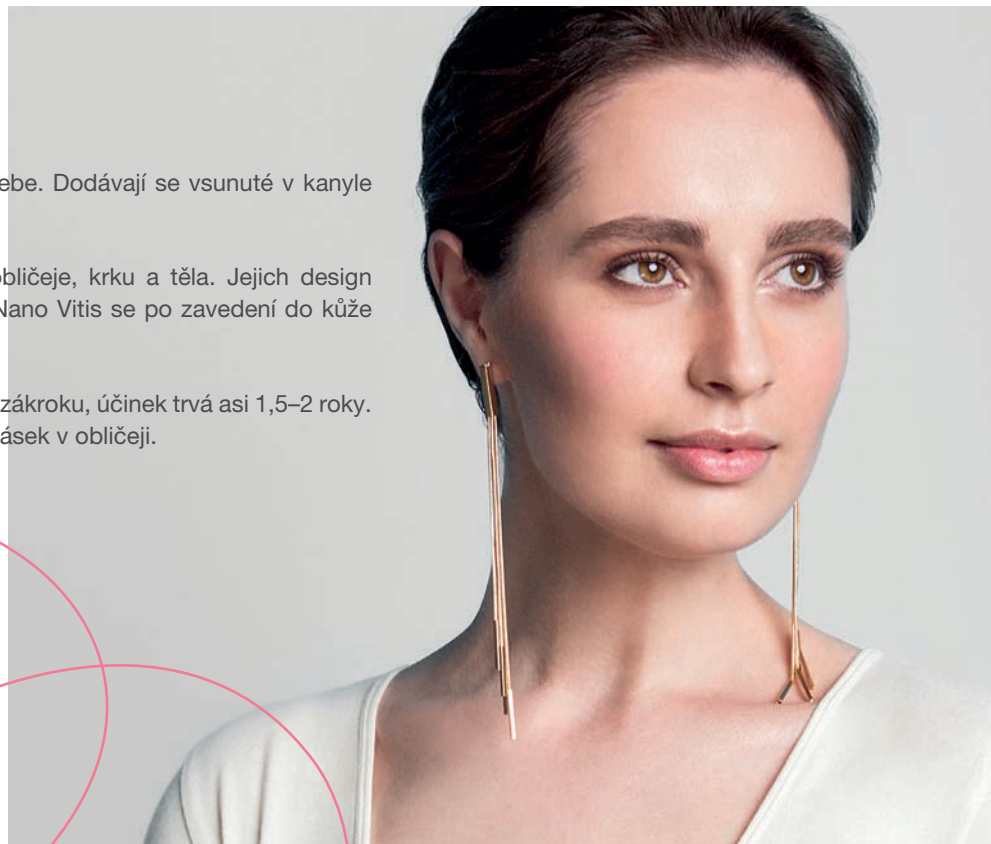


OBLASTI APLIKACE:

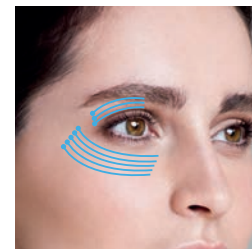


Horní a dolní víčka

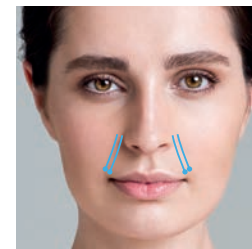


Nasolabiální rýhy

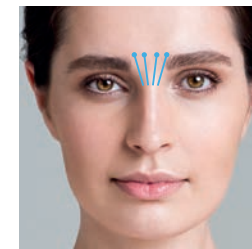

Rýhy mezi obočím

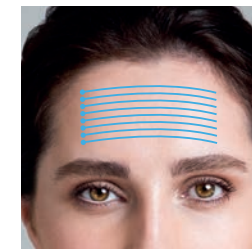


Vrásky na čele

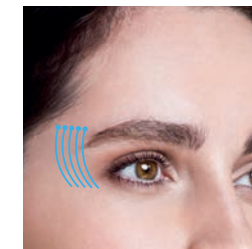


Vrásky kolem očí




Brada

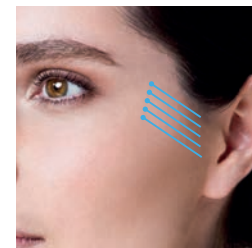

Vrásky kolem uší

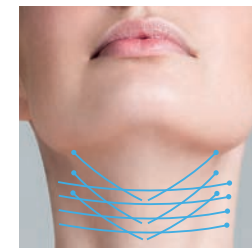

Krk

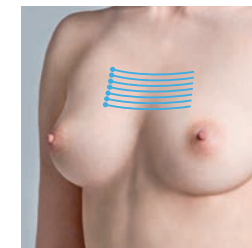

Dekolt





Ruce

Nano

METODA VITIS



BALENÍ OBSAHUJE:

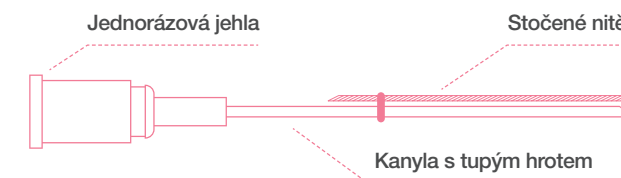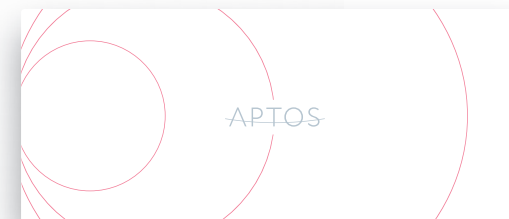

NV7

P(LA/CL) dvě stočené nitě USP 5/0, EP 1, 135 mm - 5 ks

Kanyla s tupým hrotem 22Gx70mm, rovná - 5 ks

Snímatelný nástavec jehly


METODA EXCELLENCE

Body Excellence je vstřebatelná nit se speciálně navrženými vícesměrnými háčky. Tato jedinečná vlastnost nitě zvyšuje pevnost uchycení tělních tkání. Vícesměrné háčky nití rozkládají napětí a udržují měkké tkáně pevnější.


Body Excellence lze použít k liftingu a omlazení různých částí těla: paží, prsou, břicha, hýždí, vnitřní strany stehen, kolen.

Design nití Body Excellence umožňuje jednoduchým a neinvazivním postupem efektivně fixovat celou ošetřovanou oblast. Nitě se zavádějí atraumatickou kanylou s tupou špičkou. Tím se zabrání většímu krvácení a otoku po zákroku.


Metoda je snadná a rychlá s minimální dobou zotavení. Výsledkem je obnovení kůže a objemu a výrazné zmírnění projevů stárnutí.

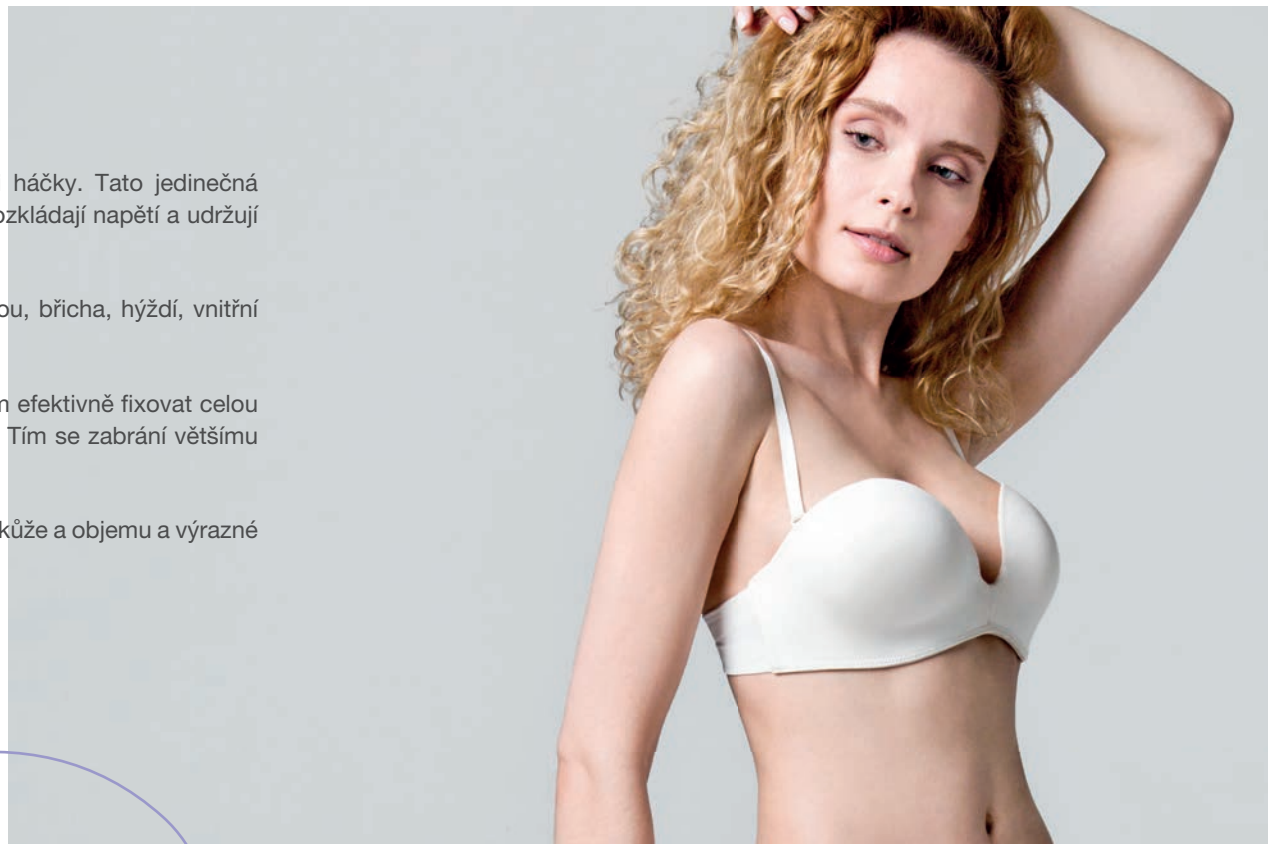


OBLASTI APLIKACE:

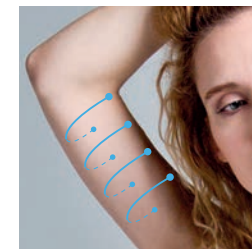

Paže

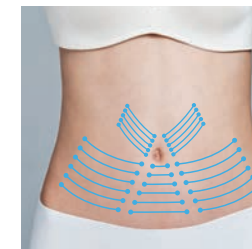

Břicho

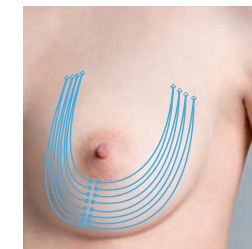

Prsa



Vnitřní strana steh





Oblast nad koleno

METODA EXCELLENCE



BALENÍ OBSAHUJE:

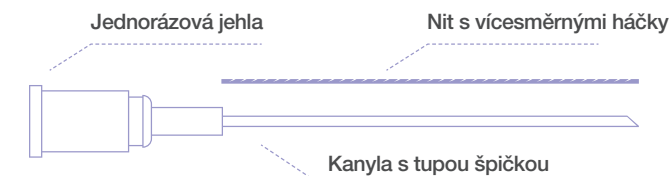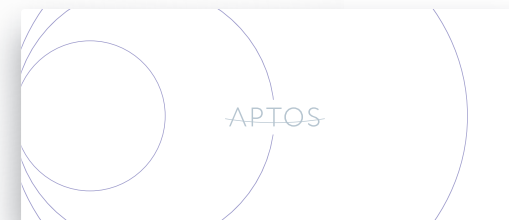

EB

P(LA/CL) nit s háčky USP 2/0, EP 3, 240 mm - 15 ks

Kanyla s tupou špičkou 19Gx200 mm, rovná - 2 ks

Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks

Snímatelný nástavec jehly

Sole

METODA RHINOPLASTY

Rhinoplasty Sole je nit s vícesměrnými háčky umožňující neinvazivní a přirozenou korekci nosu bez nutnosti chirurgického zákroku.

Struktura umožňuje chirurgům korigovat asymetrické nozdry, nosní hřbet nebo také zúžit konturu nosu jediným stehem vedeným z jedné strany na druhou bez vytažení jehly z kůže.

Tím to postupem se zabrání retrakci kůže na výstupních místech.



OBLASTI APLIKACE:





Nos

Sole

METODA RHINOPLASTY



BALENÍ OBSAHUJE:

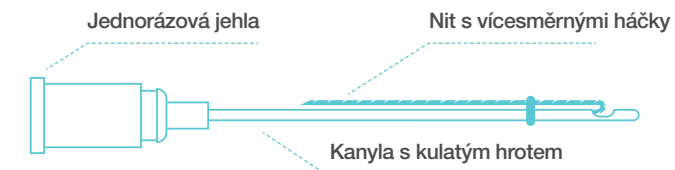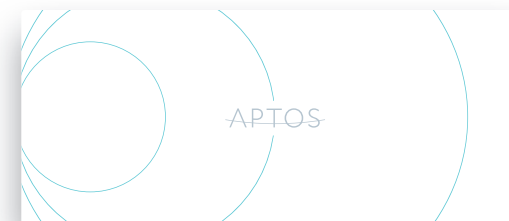

LLN2GSSP

P(LA/CL) nít s háčky USP 2/0, EP 3, 120 mm - 5 ks
Kanyla s kulatým hrotem 20Gx120 mm, rovná - 5 ks
Kanyla s kulatým hrotem 23Gx80 mm, rovná - 1 ks
Lancetová jehla 18Gx40 mm, rovná - 1 ks
Lancetová jehla 30Gx13 mm, rovná - 1 ks
Snímatelný nástavec jehly

Poznámky



Aptos s. r. o.

Balbínova 206/16, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

www.aptos.cz